



NCGM

Full PPEの付け方

平成26年10月31日作成

Step 1

- ディスポ手術下着、足下を着用する。
- 胸に **カードキー** をつける。



Step 2

- つなぎスーツ（タイベック®）を着用する。
- 足カバーを着ける。




Step 3

- N95マスクを着ける。
- 鼻梁に隙間がないように調節する。
- ユーザーシールチェックを実施する。



Step 4

- 眼球結膜保護するためにゴーグルを着用する。
- ゆるみを調節する。
※ゴムタイプの場合

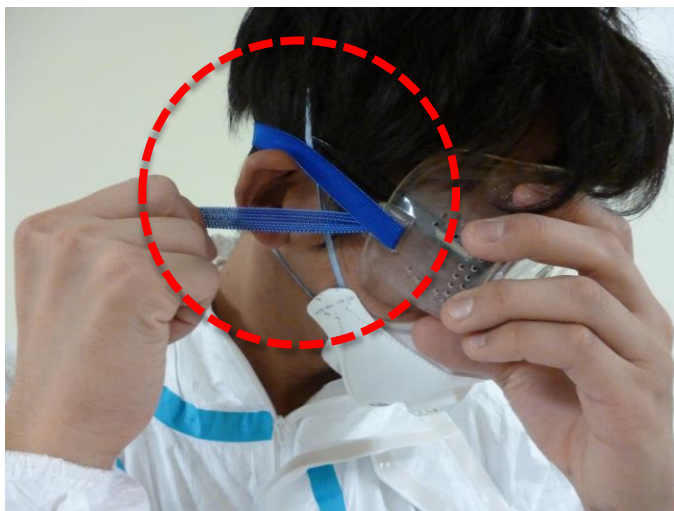

Step 5

- つなぎスーツで頭部を覆う。
- 露出部位を最小限にすること。
- 髪が出ない様にする
(長い場合、前髪はピンで留め、髪全体は束ねる)

防護服から頭髪が出ないように注意



Step 6

- インナー（内側）手袋を着ける。
- 手袋は**スーツの外側**を覆うこと。



手袋はスーツの外側を覆う



Step 7

- 耐水ディスポガウンを着用する。
- 介助を依頼し背中も十分に覆う。



腰紐は横で結ぶと解きやすい

Step 8

- ファイスシールドを頭部に着ける。



Step 9

- アウター（外側）手袋を着ける。
- 手袋はガウンの袖を覆うこと。



Step10

- 入室までに他者から前後、頭部からつま先までチェックを受ける。

